

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13311

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 1		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		05-Marzo-2024	
ING. DE SERVICIO: Alan Paz Morco Luciano		Firma	
TEC. DE SERVICIO: Israel Cae Cae		Firma	
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
1ra	<u>MANTENIMIENTO</u> <u>PREVENTIVO</u>	MARCA:	MINDRAY
		MODELO:	EPM12M
		SERIE:	AC9-07016743
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN:	SPIN SUR

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

✓	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
✓	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
✓	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
✓	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
✓	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
N/A	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
✓	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
✓	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
✓	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
✓	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
✓	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
✓	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
✓	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
✓	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
✓	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANFI
✓	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
✓	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
N/A	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
N/A	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
N/A	CAMBIO DE CABLE DE ECG
N/A	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
N/A	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

HORA DE ENTRADA:	9:00
HORA DE SALIDA:	11:00
OBSERVACIONES: El Equipo funciona correctamente	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO 15/02/21 JRP Gerente de Mantenimiento NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD Ing. Hugo Ramírez Ramírez Jefe de Conservación IMSS Céd. Firm. Adu. + 00000000

TECME & LAB

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13312

ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA
DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

CLIENTE:	HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 1	FECHA	05 - Mayo - 2024
DIRECCION:	CIUDAD DE MÉXICO		
ING. DE SERVICIO:	Abn Paz Morro Luciano		
TEC. DE SERVICIO:	Excel Cruz Cruz	FIRMA	
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
1ra	<u>MANTENIMIENTO</u> <u>PREVENTIVO</u>	MARCA:	MINDRAY
		MODELO:	EPM12M
		SERIE:	AC9-07016811
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN:	4to Piso Norte

ROUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- ☒ VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- ☒ REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- ☒ REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- ☒ REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- ☒ REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- ☒ REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- ☒ REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- ☒ DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- ☒ AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- ☒ AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- ☒ AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- ☒ AJUSTE DE ALTO VOLTAGE
- ☒ AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- ☒ AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- ☒ VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- ☒ PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- ☒ KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- ☒ CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- ☒ CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- ☒ CAMBIO DE CABLE DE ECG
- ☒ CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- ☒ CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

HORA DE ENTRADA:	11:00
HORA DE SALIDA:	13:00
OBSERVACIONES: El Equipo se entrega funcionando	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
	Ing. Hugo Ramírez Ramírez Jefe de Conservación Céd. 0245364 Mat. 9838060
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

TECME & LAB

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13313

ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA
DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 1		FECHA																																													
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		05-Marzo-2024																																													
ING. DE SERVICIO: <i>Alfonso Nasco Lujano</i>		FIRMA																																													
TEC. DE SERVICIO: <i>Sigael Gue Cruz</i>																																															
VISITA No: 1ra	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES																																													
	<u>MANTENIMIENTO</u> <u>PREVENTIVO</u>	MARCA:	MINDRAY																																												
		MODELO:	EPM12M																																												
		SERIE:	AC9-07016770																																												
		INVENTARIO:																																													
	UBICACIÓN:	<i>5to Piso Sur</i>																																													
ROUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:																																															
<table border="0"><tr><td>☒</td><td>VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES</td></tr><tr><td>☒</td><td>REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO</td></tr><tr><td>☒</td><td>REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG</td></tr><tr><td>☒</td><td>REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA</td></tr><tr><td>☒</td><td>REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO</td></tr><tr><td>☒</td><td>REVISIÓN DE GASTO CARDIACO</td></tr><tr><td>☒</td><td>REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)</td></tr><tr><td>☒</td><td>DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA</td></tr><tr><td>☒</td><td>AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS</td></tr><tr><td>☒</td><td>AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS</td></tr><tr><td>☒</td><td>AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN</td></tr><tr><td>☒</td><td>AJUSTE DE ALTO VOLTAJE</td></tr><tr><td>☒</td><td>AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO</td></tr><tr><td>☒</td><td>AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA</td></tr><tr><td>☒</td><td>VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL</td></tr><tr><td>☒</td><td>PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO</td></tr><tr><td>☒</td><td>KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</td></tr><tr><td>☒</td><td>CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO</td></tr><tr><td>☒</td><td>CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP</td></tr><tr><td>☒</td><td>CAMBIO DE CABLE DE ECG</td></tr><tr><td>☒</td><td>CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA</td></tr><tr><td>☒</td><td>CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2</td></tr></table>				☒	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES	☒	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO	☒	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG	☒	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA	☒	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO	☒	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO	☒	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)	☒	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA	☒	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS	☒	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS	☒	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	☒	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE	☒	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO	☒	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA	☒	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL	☒	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO	☒	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	☒	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO	☒	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP	☒	CAMBIO DE CABLE DE ECG	☒	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA	☒	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2
☒	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES																																														
☒	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO																																														
☒	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG																																														
☒	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA																																														
☒	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO																																														
☒	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO																																														
☒	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)																																														
☒	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA																																														
☒	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS																																														
☒	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS																																														
☒	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN																																														
☒	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE																																														
☒	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO																																														
☒	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA																																														
☒	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL																																														
☒	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO																																														
☒	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA																																														
☒	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO																																														
☒	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP																																														
☒	CAMBIO DE CABLE DE ECG																																														
☒	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA																																														
☒	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2																																														
HORA DE ENTRADA:		<i>13:00</i>																																													
HORA DE SALIDA:		<i>15:00</i>																																													
OBSERVACIONES:																																															
<i>El equipo funciona correctamente</i>																																															
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO		RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD																																													
<i>Erasto Gue Cruz</i>		<i>[Signature]</i>																																													
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA		FIRMA JCU																																													

TECME & LAB

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13316

ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA
DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 1		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		05 - Mayo - 2024
ING. DE SERVICIO: <i>Alfonso Paz Mosco Leticiano</i>		FIRMA
TEC. DE SERVICIO: <i>Israel Cruz Cruz</i>		
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
1ra	<u>MANTENIMIENTO</u> <u>PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-0701735
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: 670 PESOS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

☒	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
☒	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
☒	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
☒	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
☒	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
☒	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
☒	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
☒	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
☒	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
☒	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
☒	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
☒	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
☒	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
☒	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
☒	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
☒	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
☒	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
☒	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
☒	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
☒	CAMBIO DE CABLE DE ECG
☒	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
☒	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

HORA DE ENTRADA:	15:00
HORA DE SALIDA:	17:00

OBSERVACIONES:
<i>El equipo funciona correctamente</i>

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

TECME & LAB

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

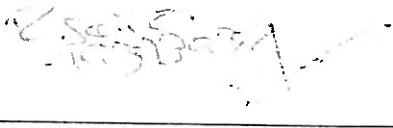
13317

ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA
DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 1		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		06 - Marzo - 2024
ING. DE SERVICIO: Alan Paz Mosco Luciano		FIRMA
TEC. DE SERVICIO: Israel Cruz Cruz		
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
1ra	<u>MANTENIMIENTO</u> <u>PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016740
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: 6to Pdo 504

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

☒	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
☒	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
☒	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
☒	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
☒	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
☒	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
☒	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
☒	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
☒	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
☒	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
☒	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
☒	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
☒	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
☒	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
☒	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
☒	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
☒	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
☒	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
☒	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
☒	CAMBIO DE CABLE DE ECG
☒	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
☒	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

HORA DE ENTRADA:	9:00
HORA DE SALIDA:	11:00
OBSERVACIONES: El Equipo funciona Correctamente	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
	
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13319

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 1		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		06-11-2024
ING. DE SERVICIO: Alan Paz Mosco Luciano		FIRMA
TEC. DE SERVICIO: Israel Goez Goez		
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
1ra	<u>MANTENIMIENTO</u> <u>PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016765
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: SEXTO PISO NORTE

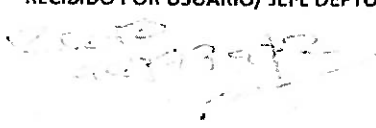
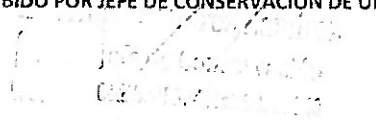
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

☒	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
☒	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
☒	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
☒	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
☒	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
☒	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
☒	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
☒	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
☒	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
☒	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
☒	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
☒	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
☒	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
☒	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
☒	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
☒	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
☒	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
☒	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
☒	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
☒	CAMBIO DE CABLE DE ECG
☒	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
☒	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

HORA DE ENTRADA:	11:00
------------------	-------

HORA DE SALIDA:	13:00
-----------------	-------

OBSERVACIONES:	El Equipo funciona Correctamente
----------------	----------------------------------

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
	
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

TECME & LAB

ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA
DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13321

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 1		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		06-UNICO-2824
ING. DE SERVICIO: Alan Paz Marco Larrino		FIRMA
TEC. DE SERVICIO: Israel Gorroz		
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
1ra	<u>MANTENIMIENTO</u> <u>PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016794
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: 5to PISO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- ☒ VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- ☒ REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- ☒ REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- ☒ REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- ☒ REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- ☒ REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- ☒ REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- ☒ DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- ☒ AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- ☒ AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- ☒ AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- ☒ AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- ☒ AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- ☒ AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- ☒ VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- ☒ PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- ☒ KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- ☒ CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- ☒ CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- ☒ CAMBIO DE CABLE DE ECG
- ☒ CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- ☒ CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

HORA DE ENTRADA:	13:00
HORA DE SALIDA:	15:00
OBSERVACIONES:	
El equipo funciona correctamente	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

TECME & LAB

S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No.

13322

ASESORIA, INSTALACION, SERVICIO Y VENTA
DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS Y DE LABORATORIO

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 1		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		06-MARCO-2024
ING. DE SERVICIO: Alin Per Marco Luciano		FIRMA
TEC. DE SERVICIO: Srae Cruz Cruz		
VISITA No:	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
1ra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARCA: MINDRAY
		MODELO: EPM12M
		SERIE: AC9-07016766
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: 6to piso - Norte

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- ☒ VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- ☒ REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- ☒ REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- ☒ REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- ☒ REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- ☒ REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- ☒ REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- ☒ DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- ☒ AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- ☒ AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- ☒ AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- ☒ AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- ☒ AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- ☒ AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- ☒ VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- ☒ PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- ☒ KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- ☒ CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- ☒ CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- ☒ CAMBIO DE CABLE DE ECG
- ☒ CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- ☒ CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2

HORA DE ENTRADA:	15:00
HORA DE SALIDA:	17:00
OBSERVACIONES: El Equipo funciona Correctamente	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
NOMBRE, FIRMA Y MATRÍCULA	FIRMA JCU

		BITACORA	FOLIO 0613
CONTRATO: 0196YR079N1824-008-00			
HOSPITAL: Hospital General Regional 1 "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro" IMSS			
DIRECCIÓN: Gabriel Mancera 222 Col del Valle Nte B3 03100 CMX			
FECHA: 13/JUNIO/2024		Fecha termina 13/JUNIO/2024	
		FOLIO ODS: 3262	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO			
MARCA: Siare	MODELO: Storetron 4000	SERIE: 64877	INVENTARIO: 63
SERVICIO REALIZADO			
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE	☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #	☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Reprogramación de mantenimiento preventivo OTRO:
FALLA REPORTADA			
Se reprograma según mantenimiento preventivo de VENTILADOR VOLUMÉTRICO			
REFACCIONES INSTALADAS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3	[Wavy line]	5	[Wavy line]
ACTIVIDAD REALIZADA			
Ventilador volumétrico con número de serie 64877 se encuentra en servicio conectado a paciente.			
Se notificó a personal encargado de inhaloterapia que se brindará el mantenimiento preventivo una vez que el equipo sea desocupado.			
Personal responsable notificará a proveedor fecha para realizar el mantenimiento.			
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO		SELO DE LA UNIDAD MÉDICA	
37 01 01 142902		H.G.R. 1 CONSERVACIÓN	
ESTATUS DEL EQUIPO		SUJETO A REVISIÓN EQUIPO CON PACIENTE	
☐ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
NOMBRE: ING MIGUEL LOPEZ		NOMBRE: Dra. Soledad Berumen Sot	
FIRMA: [Signature]		FIRMA: [Signature]	
MATERICULA: HOSPITIUM SOLUTIONS		MATERICULA: Matricula 10484922	
CARGO: INGENIERO DE SERVICIO		CARGO: Jefe de Conservación	
USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	



BITACORA

FOLIO

0609

CONTRATO: 0195 YR 079 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General Regional 1 "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarero" IMSS

DIRECCIÓN: Gabriel Mancera 222 Col. del Valle Nte. B.J. 031000 CDMX

FECHA: 13/jun/2024 Fecha término 13/jun/2024

FOLIO ODS: 3238

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Slare

MODELO:

Slaretron 4000

SERIE:

63692

INVENTARIO:

68

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #2doMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a VENTILADOR VOLUMETRICO

UBICACIÓN: INHALOTERAPIA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R5020001	Kit maintenance 4000 15'		
E3100070	Sensor inspiratorio		
REG TRA	Regulador / trampa de agua		
TRC ENC	Tarjeta controladora con encoder		

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1) Reemplazo de kit de mantenimiento en sistema inspiratorio y expiratorio del ventilador (celda O₂, bloque expiratorio (sensor de flujo))
- 2) Instalación de nuevo sensor inspiratorio
- 3) Instalación de trampa de agua con manómetro analógico; presión 4 bar
- 4) Instalación de tarjeta controladora con encoder (perfil) y led indicador de suministro de corriente eléctrica.

CALIBRACIONES

- a) Celda O₂: OK/ b) Prueba de fugas: OK/ c) Trampa de Agua (Aire): OK/
d) Sensores: OK/ e) Voltaje batería: 13.5V OK/ f) Reset horas parciales: OK/

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE ORDENADO EN UN 100%.

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

370101142902

H.G.R. 1 CONSERVACIÓN

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HGR No. 1 LOS CARLOS MAC GREGOR SANCHEZ NAVARERO
IMSS
13 JUN. 2024

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



SUJETO A REVISIÓN
EQUIPO CON PACIENTE
RECIBIDO
CONSERVACIÓN RESIDENCIAL No. 1

NOMBRE: ING. MILEZ

NOMBRE: Dra. Soledad Borumen Sosa

NOMBRE:

FIRMA:

HOSPITIUM
SOLUTIONS

FIRMA:

Matrícula 10484922

Ced. Prof. 2146395

Ced. Esp. 9007000

CARGO:

FIRMA:

Matrícula 98384643

IMSS Subjefe de Conservación

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA

HOSPITRUM
SOLUTIONS

BITACORA

FOLIO

0606

CONTRATO: 0196V12 019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General Regional 1 "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarero" IMSS

DIRECCIÓN: C. Gabriel Mancera 222 Col. del Valle Nte. B.J. 03100. CDMX

FECHA: 12/ JUNIO/2024 Fecha termino 12/ JUNIO/2024

FOLIO ODS: 3255

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

66851

INVENTARIO:

60

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2dbMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a VENTILADOR VOLUMÉTRICO
UTILIZACIÓN: INHALOTERAPIA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS02C0001	Kit mantenimiento 4000 15'		
EF3100020	Sensor inspiratorio		
REG. TRA.	Regulador / Trampa de Agua		
TAR. ENC.	Tarjeta controladora con encoder		

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1) Reemplazo de kit de mantenimiento en sistema de inspiración y expiración del ventilador (celda O₂ y bloque expiratorio (sensor de flujo))
- 2) Instalación de nuevo sensor de flujo inspiratorio.
- 3) Instalación de trampa de agua con manómetro analógico; presión 4 bares.
- 4) Instalación de tarjeta controladora con encoder (panel) y led indicador de suministro de corriente eléctrica.

CALIBRACIONES

- a) Celda O₂: OK/ b) Prueba de fugas: OK/ c) Trampa de Agua (Aire): OK/
d) Sensores: OK/ e) Voltaje baterías: 13.5V OK/ f) Rest horas paradas: OK/

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE ADTD PARA REALIZAR EL TRABAJO
PARA LO QUE SE DISEÑÓ EN UN 100%

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

370101142902

H.G.R. 1 CONSERVACIÓN

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

IMSS

12 JUN. 2024

H.G.R. No. 1 DR. CARLOS MAC GREGOR SANCHEZ NAVARERO

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



SUJETO A REVISIÓN

RECIBIDO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: ING. AMARILLO

NOMBRE: Dra. Soledad Benavente Soto

NOMBRE:

FIRMA: HOSPITRUM SOLUTIONS

FIRMA: Ced. Prof. 2146395
Ced. Esp. 908511FIRMA: Ing. Gerardo Lemus Hernández
MATRICULA: 98384643

CARGO:

CARGO: INASS Subjefe de Conservación

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO

0607

CONTRATO: 0196 YR 019 N 1824 - 008 - 00

HOSPITAL: Hospital General Regional 1 "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro" IMSS

DIRECCIÓN: Gabriel Manera 222 Tol del Valle Nte BJ 03100 CDMX

FECHA: 12/JUNIO/2024 Fecha término 12/JUNIO/2024

FOLIO ODS: 3256

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Store	MODELO: Storetron 4000	SERIE: 65162	INVENTARIO: 66
--------------	------------------------	--------------	----------------

SERVICIO REALIZADO

☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE	☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #2db	☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO
---	---	---

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a VENTILADOR VOLUMÉTRICO

UBICACIÓN: INHALOTERAPIA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS02000A1	Kit mantenimiento 4000 15"		
EP3100000	Sensor inspiratorio		
265 TRA	Regulador/trampa de agua		
TAIR ENC	Tirajeta controladora con error		
CAB-D2	Cable para sensor O2		

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1) Reemplazo de Kit de mantenimiento en sistema de inspiración y expiración del ventilador. (celda O₂ y bloque espiratorio (sensor de flujo))
- 2) Instalación de nuevo sensor inspiratorio.
- 3) Instalación de trampa de agua con manómetro analógico; presión 0,4 bares
- 4) Instalación de tarjeta controladora con error (peilla) y led indicador de suministro de corriente eléctrica.
- 5) Instalación de nuevo cable RTA para celda de O₂.

CALIBRACIONES

- a) Celda O₂: OK/ b) Prueba de fugas: OK/ c) Trampa de Agua (Aire): OK/
d) Sensores: OK/ e) Voltaje baterías (13,5V) OK/ f) Reset horas perdidas: OK/

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA

LO QUE FUE DIFERADO
AL 100%

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

37/01/01/142902

H.G.R. 1 CONSERVACIÓN

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

12 JUN. 2024

SUJETO A REVISIÓN

RECIBIDO

CONSERVACIÓN RESIDENCIAL No. 25
EQUIPO CON PACIENTE

ESTATUS DEL EQUIPO

☒ FUNCIONAL AL 100%☐ FUERA DE SERVICIO

NOMBRE: ING. MIGUEL LOPEZ

NOMBRE: Dra. Soledad Berumen Sal

Jefatura de Inhaloterapia

Matrícula 10484922

Ced. Prof. 2146395

Ced. Esp. 9085105

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

NOMBRE:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

FIRMA:

HOSPITIUM
SOLUTIONS

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA

Ing. Gerardo Lemus Hernández
Matrícula 98384643
Subjefe de Conservación



BITACORA

FOLIO

0603

CONTRATO: 01964R019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General Regional 1 "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro" IMSS

DIRECCIÓN: C. Gabriel Mancera 772 Col. Del Valle Nte. B.J. 031000 CDMX

FECHA: 12/jun/2024 Fecha término 12/jun/2024 FOLIO ODS: 3253

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretra 4000

SERIE:

66889

INVENTARIO:

65

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #2dbMANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a Ventilador Volumétrico
Obstrucción INHALOTERAPIA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS02000A1	Kit mantenimiento 4000 IS'		
EB1000020	Sensor flujo inspiratorio		
REF. TRA	Regulador / Trampa de agua		
TRR EXC.	Tabla controladora con Encoder		

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1) Reemplazo de kit de mantenimiento en sistema de inspiración y expiración del ventilador (Celda O₂ y bloque espiratorio (sensor de flujo))
- 2) Instalación de nuevo sensor de flujo inspiratorio
- 3) Instalación de trampa de agua con manómetro analógico; presión 4lbars
- 4) Instalación de tarjeta controladora con encoder (perilla) y led indicador de suministro de corriente eléctrica.

CALIBRACIONES

- a) Celda O₂: OK/ b) Prueba de fugas: OK/ c) Sensores: OK/
d) Baterías: 13.5V OK/ e) Trampa de Agua: OK/ d) Reset horas paradas OK/

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO
PARA LO QUE FUE DISEÑADO EN UN PORCENTAJE DEL 100%

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

370101142602

H.G.R. 1 CONSERVACION

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

IMSS

12 JUN. 2024

SUJETO A REVISIÓN
RECIBIDO
EQUIPO CON PACIENTE
CONSERVACIÓN RESIDENCIAL

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

NOMBRE:

Ing. Miguel

NOMBRE:

Dra. Soledad Benavente Sosa

NOMBRE:

FIRMA:

HOSPITIUM

FIRMA:

Matrícula 10484922
Ced. Prof. 2146395
Ced. Esp. 9085408

FIRMA:

Ing. Gerardo Lemus Hernández

MATRICULA:

CARGO:

MATRICULA:

CARGO:

Matrícula 98384643
IMSS Subjefe de Conservación

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO

0612

CONTRATO: 0196VR019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General Regional 1 "Dr Carlos Mac Gregor Sanchez Navarro" IMSS

DIRECCIÓN: Gabriel Mancera 222 Col. Del Valle Nte 03100 BJ CDMX

FECHA: 13/JUN/2024 Fecha termino 13/JUN/2024 FOLIO ODS: 3261

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siarehan 4000

SERIE:

66898

INVENTARIO:

69

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #26MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a VENTILADOR VOLUMETRICO
UTILIZACIÓN: INHALOTERAPIA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PS0200001	Kit maintenance 4000 15"		
EA3100002	Sensor inspiratorio		
REG-TAR	Regulador / Trampa de Agua		
TAR-ENC	Tarjeta controladora con error de		
CAB-02	Cable para sensor O2		

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1) Reemplazo de kit de mantenimiento en sistema de inspiración y respiración
- 2) Instalación de nuevo sensor inspiratorio
- 3) Instalación de trampa de agua con manómetro analógico; presión 4 bar.
- 4) Instalación de tarjeta controladora con error de (pin) y led indicador de suministro de corriente eléctrica.
- 5) Instalación de nuevo cable RJ9 para celda de O2

CALIBRACIONES:

- a) Celda O2: OK/ b) Prueba de fugas: OK/ c) Trampa de Agua (Aire): OK/
d) Sensores: OK/ e) Voltaje batería: 13.6V OK/ f) Resistencia paraules: OK/

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO
PARA LO QUE FUE DISPUESTO EN UN PORCENTAJE DEL 100%

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

37 01 01 142902

H.G.R. 1 CONSERVACIÓN

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

IMSS

13 JUN. 2024

H.G.R. No. 1 DR. CARLOS MAC GREGOR SANCHEZ NAVARRO

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

SUJETO A REVISIÓN
RECIBIDO
EQUIPO EN
CONSERVACIÓN RESERVA PACIENTE

NOMBRE:

ING. GERARDO LEMUS HERNÁNDEZ

NOMBRE:

Dra. Soledad Berumen Soc

NOMBRE:

Ing. Gerardo Lemus Hernández

FIRMA:

HOSPITIUM

FIRMA:

Matrícula 10484922

FIRMA:

Matrícula 98384643

MATRICULA:

Ced. Prof. 2146395

MATRICULA:

IMSS Subjefe de Conservación

CARGO:

Ced. Esp. 9085108

CARGO:

IMSS Subjefe de Conservación

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
0611

CONTRATO: 0196YR019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General Regional I "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro" IMSS

DIRECCIÓN: Gabriel Mancera 222 Col del Valle Nte. BJ. CDMX 03100

FECHA: 13/junio/2024 Fecha término 13/junio/2024 FOLIO ODS: 3260

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Slare	MODELO: Siaretron 4000	SERIE: 65206	INVENTARIO: 64
--------------	------------------------	--------------	----------------

SERVICIO REALIZADO

☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE	☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2da	☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO:
---	--	---	-------

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a VENTILADOR VOLUMETRICO
UBICACIÓN: INHALOTERAPIA

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RS02000A	Kit mantenimiento 4000 IS	REG. TRA	Regulador/trampa de agua
6004350000	Mandrel Expiratory Valve	PM-13-1.2	2 Baterías (12V, 1.3Ah)
PSK11-917-7A	Sensor O2		
EB100020	Sensor inspiratorio		
TAR. ENC	Tarjeta controladora con ENCER		

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1) Reemplazo de kit de mantenimiento en sistema de inspiración y expiración.
- 2) Instalación de nuevo sensor de flujo y nueva celda para oxígeno
- 3) Instalación de nuevo sensor inspiratorio
- 4) Instalación de trampa de agua con manómetro analógico; presión 4 bar.
- 5) Instalación de tarjeta controladora con encase (pestaña) y led indicador de suministro de corriente eléctrica
- 6) Instalación de nuevas baterías (12V, 1.3Ah)

CALIBRACIONES

- a) Celda: O2: OK/ b) Prueba de fugas: OK/ c) Trampa de Agua (Aire): OK/
d) Sensores: OK/ e) Voltaje baterías: (13.6V) OK/ f) Reset horas paradas: OK/

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS PARA LO QUE FUE DISEÑADO EN:

UN PORCENTAJE DEL 100% SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

370101142902
I.O.R. 1 CONSERVACIÓN

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

13 JUN. 2024

SUJETO A REVISIÓN
RECIBIDO

EQUIPO CON PACIENTE

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO

NOMBRE: Ing. Gerardo Lemus Hernández

NOMBRE: Soledad Beramen Solís

NOMBRE:

FIRMA: HOSPITIUM SOLUTIONS

FIRMA: Soledad Beramen Solís
MATRICULA: Matricula 10484922
Cod. Prof. 2146395
Cod. Esp. 9085108FIRMA: Ing. Gerardo Lemus Hernández
MATRICULA: Matricula 98384643
CARGO: Jefe de Conservación

RFC: HSO190507A66

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA