

 HOSPITIUM SOLUTIONS	ORDEN DE SERVICIO		Fecha de emisión: Octubre de 2020
			Fecha de vigencia: Octubre de 2022
	Código:	F:0008: 01/1	Revisión: 000

HOSPITAL O INSTITUCIÓN: 462 194 IMSS

FOLIO:

PROYECTO: INSABI

LUGAR Y FECHA: Naucalpan 20-12-2021

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: SIARE	MODELO: Siaretron 4000	Nº. DE SERIE: <u>66932</u>	UBICACIÓN:
------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------

INTERVENCIÓN A REALIZAR

☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE	☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐ CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN	☐ CAPACITACIÓN	☐ RETIRO DE EQUIPO
---	--	---	---	---------------------------------------	---

FALLA REPORTADA

Calibración de sensores en ventilador SIARE

REFACCIONES RETIRADAS

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA

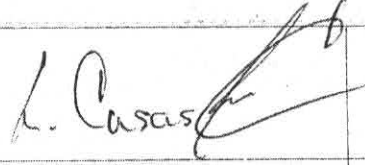
ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al equipo dónde:

- a) Se realiza limpieza del equipo (exterior).
- b) Se cambia válvula de exhalación y O-rings de sensor de flujo.
- c) Limpieza de filtros de ventilación.
- d) Se calibra celda galvánica de oxígeno, la cual pasa test satisfactorio a 48 mV
- e) Se calibra sensor de flujo.
- f) Se calibra y sensibiliza pantalla Touch screen de forma satisfactoria.
- g) Se realiza cambio de O-rings en ventilador.
- h) Se resetean horas de uso parciales en el ventilador, con unas horas totales de 2021h 36m 22s.

Se realizan pruebas de funcionamiento.

Se añade checklist operatorio del equipo.

 L. Casas	 RESPONSABLE DE ÁREA USUARIA	 C.P. MARTIN MARTINEZ RUIZ JEFE DE FINANZAS
INGENIERO DE SERVICIO	RESPONSABLE DE ÁREA USUARIA	RESPONSABLE DEL HOSPITAL

 HOSPITIUM SOLUTIONS	ORDEN DE SERVICIO		Fecha de emisión: Octubre de 2020
			Fecha de vigencia: Octubre de 2022
	Código:	F:0008: 01/1	Revisión: 000

HOSPITAL O INSTITUCIÓN: H62 194 IMSS **FOLIO:**

PROYECTO: INSABI

LUGAR Y FECHA: Naucalpan — 20-12-2021

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO			
MARCA: SIARE	MODELO: Siaretron 4000	Nº. DE SERIE: 66 926	UBICACIÓN:
INTERVENCIÓN A REALIZAR			
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE	☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐ CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN
		☐ CAPACITACIÓN	☐ RETIRO DE EQUIPO

FALLA REPORTADA

Calibración de sensores en ventilador SIARE

REFACCIONES RETIRADAS		REFACCIONES INSTALADAS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA

ACTIVIDAD REALIZADA

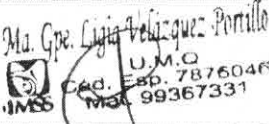
Se realiza mantenimiento preventivo al equipo dónde:

- a) Se realiza limpieza del equipo (exterior).
- b) Se cambia válvula de exhalación y O-rings de sensor de flujo.
- c) Limpieza de filtros de ventilación.
- d) Se calibra celda galvánica de oxígeno, la cual pasa test satisfactorio a 48 mV
- e) Se calibra sensor de flujo.
- f) Se calibra y sensibiliza pantalla Touch screen de forma satisfactoria.
- g) Se realiza cambio de O-rings en ventilador.
- h) Se resetean horas de uso parciales en el ventilador, con unas horas totales

de 2250h 8n 45r

Se realizan pruebas de funcionamiento.

Se añade checklist operatorio del equipo.

 INGENIERO DE SERVICIO	 RESPONSABLE DE ÁREA USUARIA	 RESPONSABLE DEL HOSPITAL
---	---	--

 HOSPITIUM SOLUTIONS	ORDEN DE SERVICIO		Fecha de emisión:
			Octubre de 2020
	Código: F:0008: 01/1		Fecha de vigencia:
			Octubre de 2022
		Revisión:	
		000	

HOSPITAL O INSTITUCIÓN: 1462 194 1455 **FOLIO:**
PROYECTO: INSABI
LUGAR Y FECHA: Naucolpan 20-12-2021

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO			
MARCA: SIARE	MODELO: Siaretron 4000	Nº. DE SERIE: 66917	UBICACIÓN:

INTERVENCIÓN A REALIZAR					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE	☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐ CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN	☐ CAPACITACIÓN	☐ RETIRO DE EQUIPO

FALLA REPORTADA
Calibración de sensores en ventilador SIARE

REFACCIONES RETIRADAS		REFACCIONES INSTALADAS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

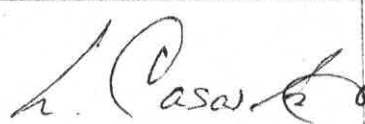
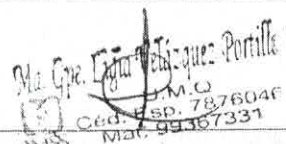
ACTIVIDAD REALIZADA
ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al equipo dónde:

- Se realiza limpieza del equipo (exterior).
- Se cambia válvula de exhalación y O-rings de sensor de flujo.
- Limpieza de filtros de ventilación.
- Se calibra celda galvánica de oxígeno, la cual pasa test satisfactorio a 48 mV
- Se calibra sensor de flujo.
- Se calibra y sensibiliza pantalla Touch screen de forma satisfactoria.
- Se realiza cambio de O-rings en ventilador.
- Se resetean horas de uso parciales en el ventilador, con unas horas totales de 1050 h 4h 32s

Se realizan pruebas de funcionamiento.

Se añade checklist operatorio del equipo.

 INGENIERO DE SERVICIO	 RESPONSABLE DE ÁREA USUARIA	 RESPONSABLE DEL HOSPITAL
---	---	--