



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-04-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

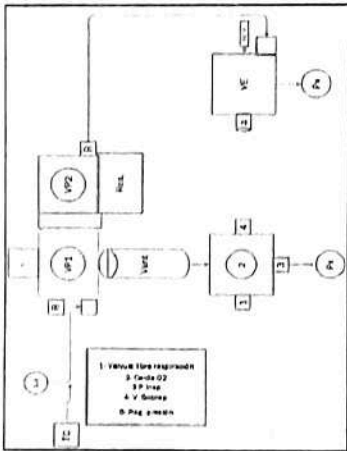
ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio	06/03/2024	Fecha fin	06/03/2024	Folio	059
Hora inicio	17:45	Hora fin	20:30	No. de reporte	

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	Hospital General de Fam No 2, Irapuato	Marca	DYDETEC
Dirección	Av. de la Reforma 301, Col. Viveros, Población 36650, Irapuato	Modelo	GIAT52
Solicitante		No. de serie	GTU1020-0472

Datos del servicio			
Ubicación en hospital		☒ Mantenimiento preventivo	
Responsable (es)		☒ Mantenimiento correctivo	
		☐ Instalación	
		☐ Capacitación	
		☐ Actualización	
		☐ Otro:	

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo	☒ Fluke VT900	☒ Kit de herramientas	☒ Verificación de desempeño
Fecha de próxima calibración	☐ IMT PT300	☒ Llaves Allen	☒ Calibración de celda
09/01/2025	☐ Otro:	☐ Otro:	☒ Prueba de fugas
			☒ Extracción de logs
			☐ Bloqueo seguridad y botones
			☐ Otro:

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico:	Se realiza inspección general del equipo encontrando que se regulador de aire no cuenta con tapón de desfogue. Se realiza limpieza y desinfección general. Se realiza mantenimiento preventivo. Se realiza cambio de regulador de aire. Se realiza verificación de desempeño exitosa. El equipo funciona correctamente. Registre tapas de escudo. Equipo funcionando correctamente ☒
	
Refacciones y consumibles	
Cantidad	Cantidad
☒ MP-0002 Batería 12 v 17 ah	☒ MP-0109 Malla de acero inox Ø7.5
☒ VG-0040 Ensamble membrana	☒ MP-0110 Escuadra 40x40
☒ VG-0050 Membrana de vacío	☐ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris
☒ MP-0059 Celda de oxígeno	☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16
☒ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	☒ MP-0113 Tuerca con collar M6
☐ VG-0056 Empaque reservorio	☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16
☒ MP-0005 Tubo de silicon 2mm x 4mm	☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6
☒ MP-0006 Tubo de silicon 3mm. Diam ext.m	☒ MP-0007 Gancho porta circuito
Otros:	
MP-0300 Regulador de presión O-1es PSJ6 -1/4" con trampa de agua y manómetro.	

Aprobó

Realizó

Ing. Autorizó

José Rafael Arellano Martínez

ING. AUTORIZÓ
JEFE DE CONSERVACIÓN



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ISSY AL FNO 2
DEPTO. CONSERVACIÓN

RECIBIDO
06 MAR. 2024

FIRMA _____ HORA _____



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio	06/03/2024	Fecha fin	06/03/2024	Folio	058
Hora inicio	17:44	Hora fin	20:00	No. de reporte	NA

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	Hospital General de zona No. 2 Irapuato	Marca	DYDETEC
Dirección	Av. de la Reforma 307, Col. Nueva Piedad 36500 Irapuato	Modelo	GATSI
Solicitante		No. de serie	GTV12020-0456
Teléfono		462 624 3100	

Datos del servicio			
Ubicación en hospital		☒ Mantenimiento preventivo	
Responsable (es)		☒ Mantenimiento correctivo	
		☐ Instalación	
		☐ Capacitación	
		☐ Actualización	
		☐ Otro:	

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Análisis de flujo	☒ Flujo VTRIO	Verificación de desempeño	☒ Extracción de logs
Fecha de próxima calibración	☐ RUT 11100	Calibración de celda	☒ Bloqueo seguridad y botones
09/01/2025	☐ Otro	Prueba de fugas	☒ Otro:

Descripción del servicio realizado																			
Diagnóstico Se realiza inspección general del equipo encontrando que no sujeta correctamente el valor de O₂. Se realiza limpieza y desinfección general. Se realiza mantenimiento preventivo. Se coloca nuevo blender. Se realiza verificación de desempeño. Requiere tapas de escuadra y regulador de O₂ presenta daño. El equipo funciona correctamente. Equipo funcionando correctamente ☒																			
Refacciones y consumibles <table><thead><tr><th>Cantidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒ MP-0002 Batería 12v 17 ah</td><td>☐ MP-0109 Malla de acero inox. 07.5</td></tr><tr><td>☒ VG-0040 Ensamble membrana</td><td>☒ MP-0110 Escuadra 40-40</td></tr><tr><td>☒ VG-0050 Membrana de vacío</td><td>☐ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris</td></tr><tr><td>☒ MP-0059 Celda de oxígeno</td><td>☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16</td></tr><tr><td>☒ MP-0055 O-ring silicon 1/4 X 7/8 X 1/16 Pulg</td><td>☒ MP-0113 Tuerca con collar M6</td></tr><tr><td>☐ VG-0056 Empaque reservorio</td><td>☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16</td></tr><tr><td>☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm</td><td>☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6</td></tr><tr><td>☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam. ext. m</td><td>☒ MP-0007 Gancho porta circuito</td></tr></tbody></table> Código: MP-0001 Blender de alto flujo		Cantidad	Cantidad	☒ MP-0002 Batería 12v 17 ah	☐ MP-0109 Malla de acero inox. 07.5	☒ VG-0040 Ensamble membrana	☒ MP-0110 Escuadra 40-40	☒ VG-0050 Membrana de vacío	☐ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris	☒ MP-0059 Celda de oxígeno	☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16	☒ MP-0055 O-ring silicon 1/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	☒ MP-0113 Tuerca con collar M6	☐ VG-0056 Empaque reservorio	☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16	☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6	☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam. ext. m	☒ MP-0007 Gancho porta circuito
Cantidad	Cantidad																		
☒ MP-0002 Batería 12v 17 ah	☐ MP-0109 Malla de acero inox. 07.5																		
☒ VG-0040 Ensamble membrana	☒ MP-0110 Escuadra 40-40																		
☒ VG-0050 Membrana de vacío	☐ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris																		
☒ MP-0059 Celda de oxígeno	☒ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16																		
☒ MP-0055 O-ring silicon 1/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	☒ MP-0113 Tuerca con collar M6																		
☐ VG-0056 Empaque reservorio	☒ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16																		
☒ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	☒ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6																		
☒ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam. ext. m	☒ MP-0007 Gancho porta circuito																		

Aprobó

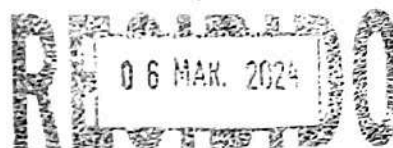
Realizó

Autorizó

José Rafael Aréllano Martínez



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Módulo de Mantenimiento
SERVICIO DE CONSERVACIÓN



FIRMA

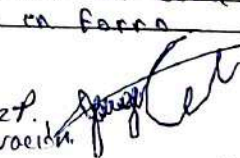
HORA

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA M. F. No. 2 IMSS
Dirección	AVENIDA DE LA REFORMA 307 IRAPUATO, COL. GÁMEZ, IRAPUATO, C.P. 36650
Localidad	IRAPUATO
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016462	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

Observaciones	
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE	
Sensor de Temperatura presenta reparación en zona de conector	
Manguera de PAUI presenta decoloración en forma	
 Ing. Abel Andrés Pérez Subjefe de Conservación Nombre, Firma o Sello	 Jorge González T. Nombre y Firma Representante EYCISA
 IMSS Cof. Espinoza Cargo Ucy Área	Fecha: 31 - Agosto - 2021 

CONSERVACION
IRAPUATO, GTO.

Residente Mazaryk 111, Piso 1
Col. Polanco V Sección
México D.F. C.P. 11560

Tel: (55) 52 80 70 58 - 59
Tel: (55) 52 80 87 20

01 800 8 EYCISA (39 24 72)
www.eycisa.com

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA M. F. No. 2 IMSS
Dirección	AVENIDA DE LA REFORMA 307 IRAPUATO, COL. GÁMEZ, IRAPUATO, C.P. 36650

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016471	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro
Localidad	IRAPUATO	Teléfono
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147-IM	

Trabajo Realizado
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

Observaciones
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE ETIQ. MTT0 2956

 IMSS CONSERVACION IRAPUATO, GTO	Nombre, Firma o Sello <i>[Firma]</i> Cargo UCI Area	Ing. A. de I. Andrés Pérez Pérez Subdirector de Conservación 94113791 DORGE GONZALEZ T. Nombre y Firma Representante EYCISA Fecha: 31 - Agosto - 2021
--	--	--

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA M. F. No. 2 IMSS
Dirección	AVENIDA DE LA REFORMA 307 IRAPUATO, COL. GÁMEZ, IRAPUATO, C.P. 36650

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016464	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro
Localidad	IRAPUATO	Teléfono
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147-IM	

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

Observaciones
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE ETIQ. MTTD 2955

 Nombre, Firma o Sello: <u>Ing. Abel Andrés Pérez Pérez</u> Cargos: <u>Subdirector de Conservación</u> 99113791	Nombre y Firma Representante EYCISA: <u>Jorge Gonzalez T.</u> Fecha: <u>31 - Agosto - 2021</u>
Cargo: <u>UCI</u> Area: <u>DEPTO. CONSERVACION IRAPUATO, GTO.</u>	

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA M. F. No. 2 IMSS
Dirección	AVENIDA DE LA REFORMA 307 IRAPUATO, COL. GÁMEZ, IRAPUATO, C.P. 36650

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016470	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro
Localidad	IRAPUATO	Teléfono
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM	

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

Observaciones
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE ETIQA MTTD 2960

<i>[Firma]</i> Nombre, Firma o Sello Ula Consuelo Durillo Jervin Cargo Especialista Area Uel	<i>[Firma]</i> Nombre y Firma Representante EYCISA Jorge Gonzalez T. Fecha: <u>31 - Agosto - 2021</u>
---	--


CONSERVACION
IRAPUATO, GTO



ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HOSPITAL GENERAL DE ZONA M. F. No. 2 IMSS
Dirección	AVENIDA DE LA REFORMA 307 IRAPUATO, COL. GÁMEZ, IRAPUATO, C.P. 36650

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016473	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro
Localidad	IRAPUATO	Teléfono
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM	

Trabajo Realizado
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

Observaciones
SERVICIO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE ETQ. MTTTO 2957
Cables Troncales (SP02, ECG) y Manguera de PAM presentan mucha decoloración. Se observa cable troncal SP02 con daño en forro - se recomienda cambio. Brazalete de PAM no es original del equipo. Cable de ECG con reparación y daño en latiguillos.
Ing. Abel Andrés Pérez Pérez Subjefe de Conservación Nombre, Firma o Sello Jorge González T. Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: 31-Agosto-2021.

CONSERVACION
IRAPUATO, GTO

Av. Presidente Mazaryk 111, Piso 1
Col. Polanco V Sección
México D.F. C.P. 11560

Tel: (55) 52 80 70 58 - 59
Tel: (55) 52 80 87 20

01 800 8 EYCISA (39 24 72)
www.eycisa.com



IMSS
CONSERVACION
IRAPUATO, GTO

EYCISA
Equipamiento y Consultoría Integral

ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGZMF No.2 IMSS
Dirección	AV. DE LA REFORMA 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, IRAPUATO, GUANAJUATO
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016473
Ubicación	COVID
Actividad	
☒ Mto. Preventivo	
☐ Mto. Correctivo	
☐ Instalación	
☐ Garantía	
☐ Otro	
Localidad	IRAPUATO, GUANAJUATO
Teléfono	800 681 2525
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física. 2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo. 3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente. 4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos. 5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	✓

Etiqu. de Mto. 2667

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE

Reyes Morales Sanjuana M. 99113424 MSS Enf. Jefe de piso Nombre, Firma o Sello Cargo Area Ing. Oscar Adrián Pérez Azú MAT. 11981156 JEFE DE CONSERVACIÓN	Luis Raúl Caballero Nombre y Firma Representante EYCISA Fecha: 19 MAYO 2022
---	--



CONSERVACION
IRAPUATO, GTO

EYCISA
Equipamiento y Consultoría Integral

ORDEN DE SERVICIO

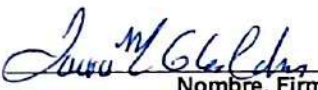
Cliente	
Nombre	HGZMF No.2 IMSS
Dirección	AV. DE LA REFORMA 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, IRAPUATO, GUANAJUATO

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016471	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro

Localidad	IRAPUATO, GUANAJUATO	Teléfono	800 681 2525
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE <u>EQUIPO CON PACIENTE, SE REPROGRAMA MTO PARA PROXIMA VISITA.</u>

 Nombre, Firma o Sello	 Nombre y Firma Representante EYCISA
<u>EET</u> 99119672 Cargo	Fecha: 19 MAYO 2022
<u>UCI</u> Area	 MAT. 11981153 JEFE DE CONSERVACIÓN



ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGZMF No.2 IMSS
Dirección	AV. DE LA REFORMA 307, COL. GÁMEZ, C.P. 36650, IRAPUATO, GUANAJUATO

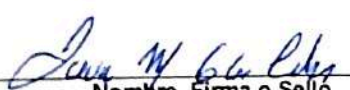
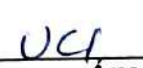
Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒ Mto. Preventivo
Marca	MINDRAY	☐ Mto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	☐ Instalación
Serie	AC9-07016464	☐ Garantía
Ubicación	COVID	☐ Otro

Localidad	IRAPUATO, GUANAJUATO	Teléfono	800 681 2525
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

ETIQ. MTO 2664

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCLOS DEL FABRICANTE

 Nombre, Firma o Sello	 Nombre y Firma Representante EYCISA
 Cargo	Fecha: 19 MAYO 2022
 Area	 MAT. 11981156 JEFE DE CONSERVACIÓN