
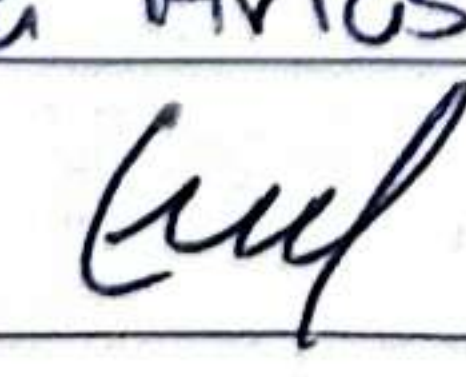
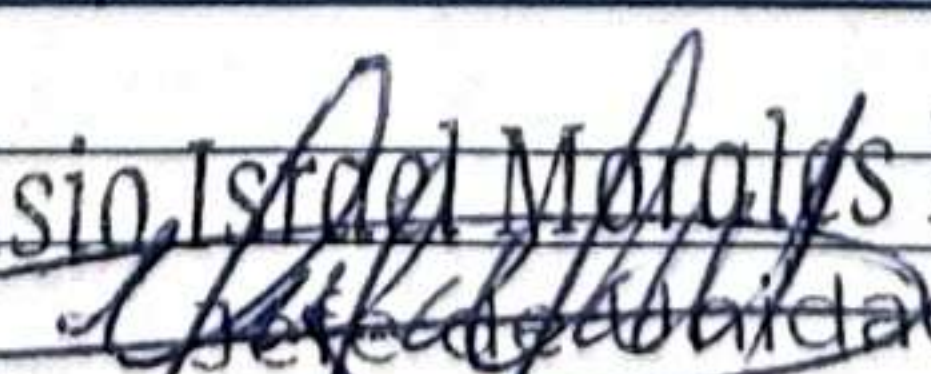
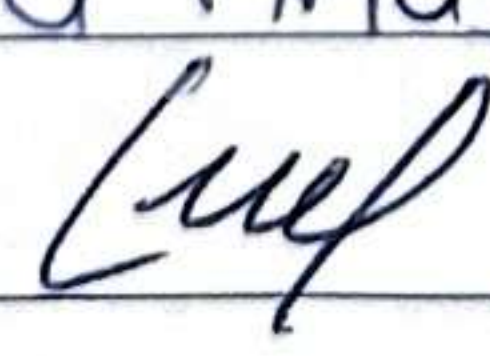


		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 3375	
CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona No 67					
DIRECCIÓN: col. Apodaca Centro, 66600, Apodaca, Nuevo Leon					
FECHA: 13 de Mayo del 2024					
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siore		MODELO: Sioretron 4000		SERIE: 65634	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico					
Ubicacion: Inhaloterapia					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
R502000A1	Kit de mantenimiento				
E96512000	2 Baterias 12 V				
G00435000	Sensor de Flujo				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla					
Procedimiento de Prueba (Service Manual Siore)					
Aspecto Fisico: OK					
Bloque Espiratorio: OK					
Mangueras Aire/O2: OK					
Cable AC: OK					
Cable Celda O2: OK					
Calibraciones:				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
Celda de O2: 52 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio: OK				IMSS	
Prueba de fugas: 5 ml/min OK				HOSPITAL GENERAL	
Baterias: OK				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO	
Horas totales: 6780h 43m 49s				200105 142902	
Equipo operativamente apto para utilizarse.				HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67 CONSERVACION	
Equipo funcionando al 100%					
Terminación de servicio: 3 de Mayo del 2024					
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
☐ EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Gregorio Missael		NOMBRE: Dr. Dionisio Israel Morales Mare		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
FIRMA: 		FIRMA: 		ING. ISRAEL HERNANDEZ LOMAS	
MATRÍCULA:		MATRÍCULA: 13350253		SUB. JEFE DE CONSERVACIÓN	
CARGO:		CARGO: Matricula 97205126		MAT: 98105723	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

		BITACORA		FOLIO 0677	
CONTRATO: 019 GYR 019 N 18 24-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General de Zona No 67					
DIRECCIÓN: col. Apodaca Centro, 66600, Apodaca, Nuevo León					
FECHA: 3 de Mayo del 2024				FOLIO ODS: 3375	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siare		MODELO: Siaretron 4000		SERIE: 65634	
INVENTARIO:					
SERVICIO REALIZADO					
☐ INSTALACIÓN Y ARRANQUE		☒ MANTENIMIENTO PREVENTIVO #1		☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Mantenimiento Preventivo a Ventilador Volumetrico					
Ubicación: Inhaloterapia					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R502000A1	Kit de mantenimiento				
E96512000	2 Baterias 12 V				
600435000	Sensor de Flujo				
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 Tabla					
Procedimiento de Prueba (Service Manual Siare)					
Aspecto Físico: OK		Bloque Espiratorio: OK			
Mangueras Aire/O ₂ : OK		Cable AC: OK			
Cable Celda O ₂ : OK					
Calibraciones:					
Celda de O ₂ : 52 mV OK					
Sensores de Flujo respiratorio: OK					
Prueba de Fugas: 5ml/min OK					
Baterias: OK					
Horas totales: 6780h 43m 49s					
Terminación de Servicio: 3 de Mayo del 2024					
Equipo operativamente apto para utilizarse		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO 200105		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
Equipo Funcionando al 100%		HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67 CONSERVACION			
ESTATUS DEL EQUIPO		☒ FUNCIONAL AL 100%		☐ FUERA DE SERVICIO	
☒ HOSPITAL EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Gregorio Missael Lracheta Arias		NOMBRE: Dr. Dionisio Israel Morales		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
FIRMA: 		FIRMA: 		ING. ISRAEL HERNANDEZ LOMAS	
MATRICULA:		MATRICULA:		MAT. 98255120	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

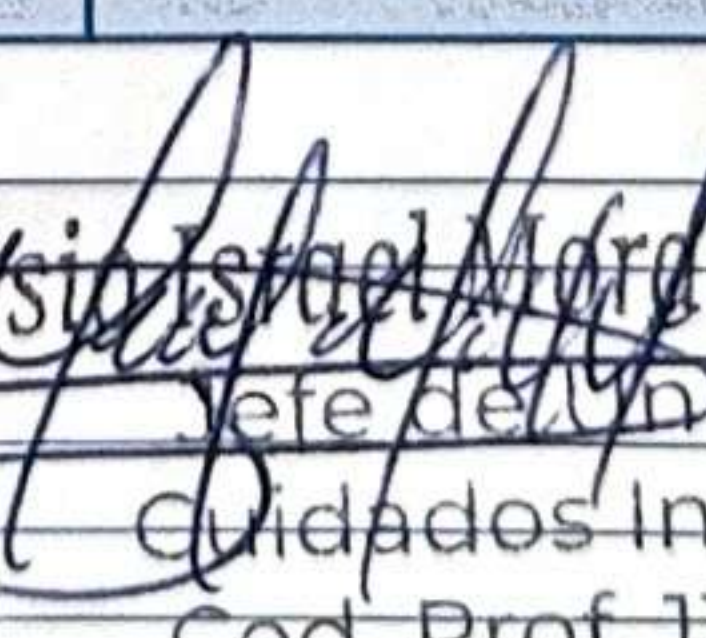

HOSPITIUM
SOLUTIONS

REPORTE FOTOGRÁFICO

FOLIO ODS

3375

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00

HOSPITAL: IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 67

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO


MARCA: SIARE

MODELO:
SIARETRON 4000


SERIE: 65634

INVENTARIO:



ANTES

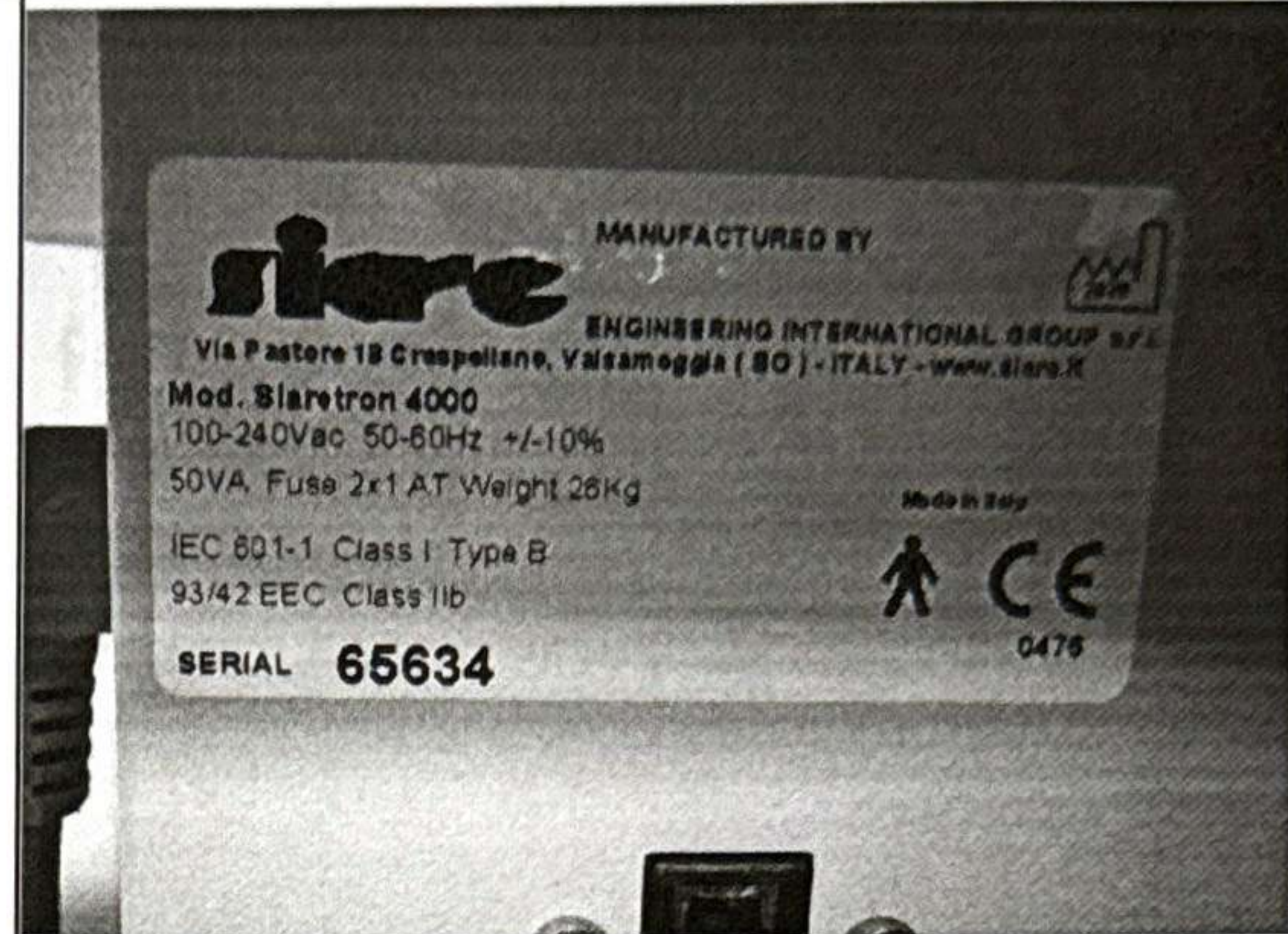

DURANTE

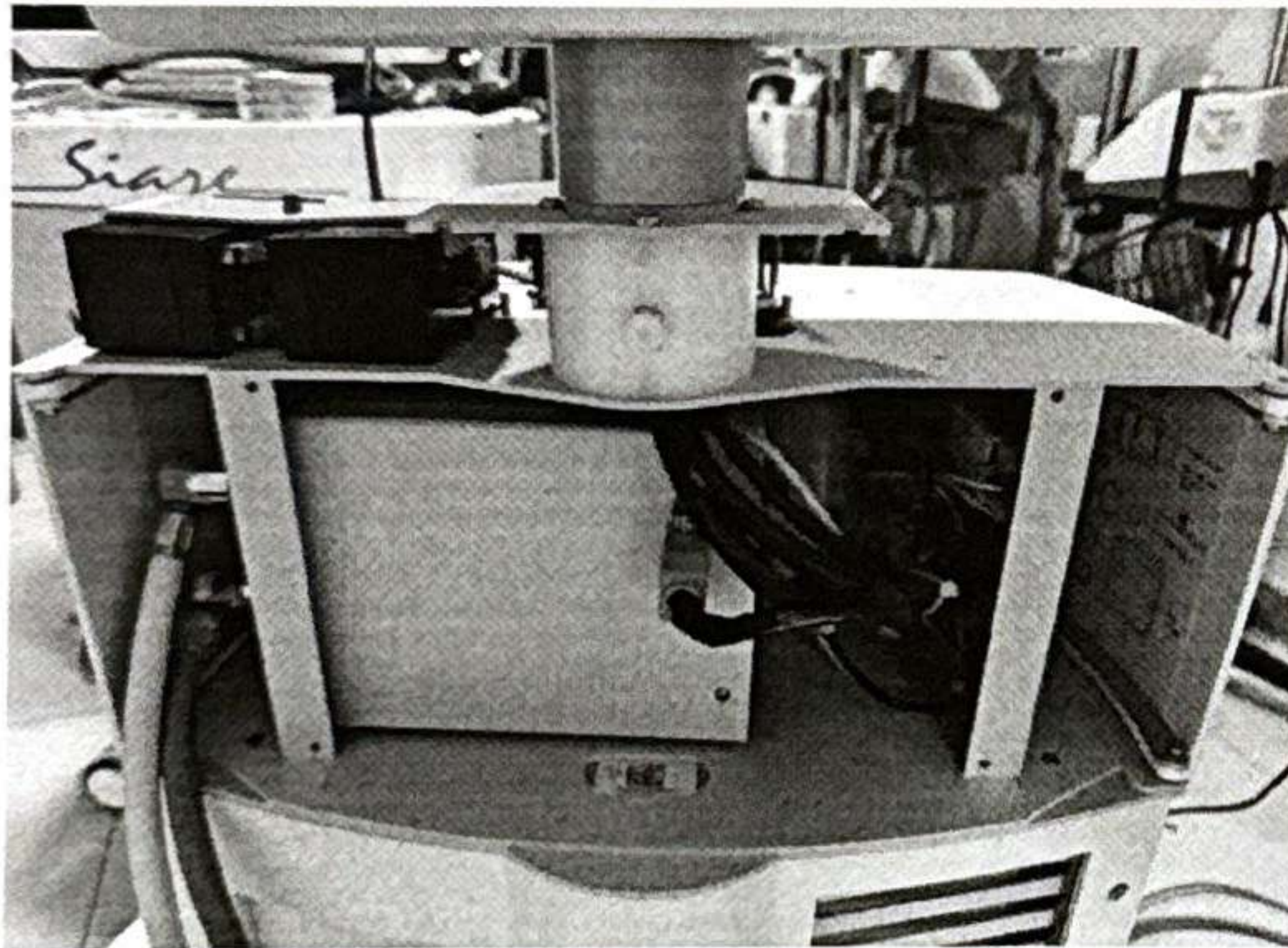

DESPUÉS

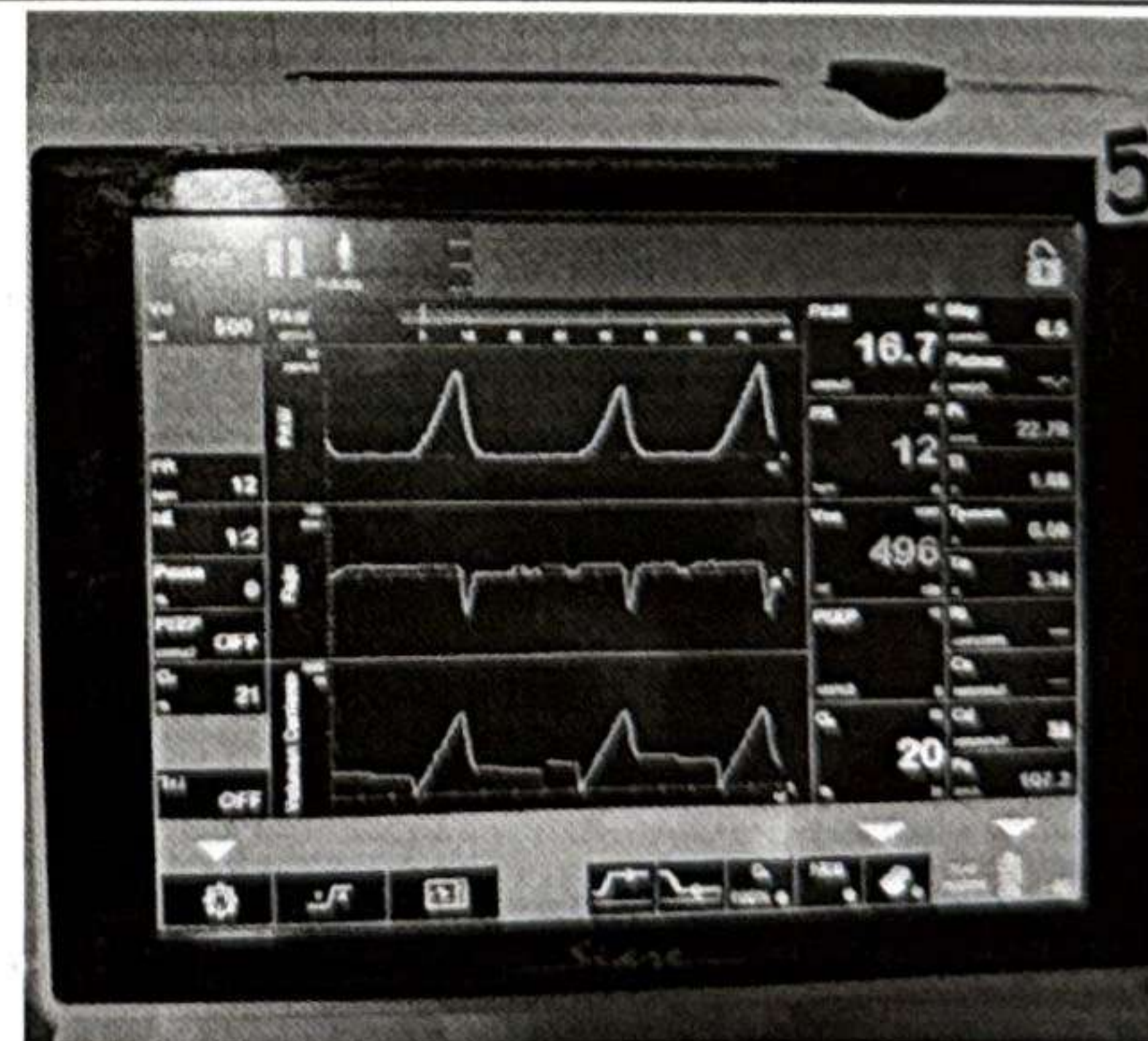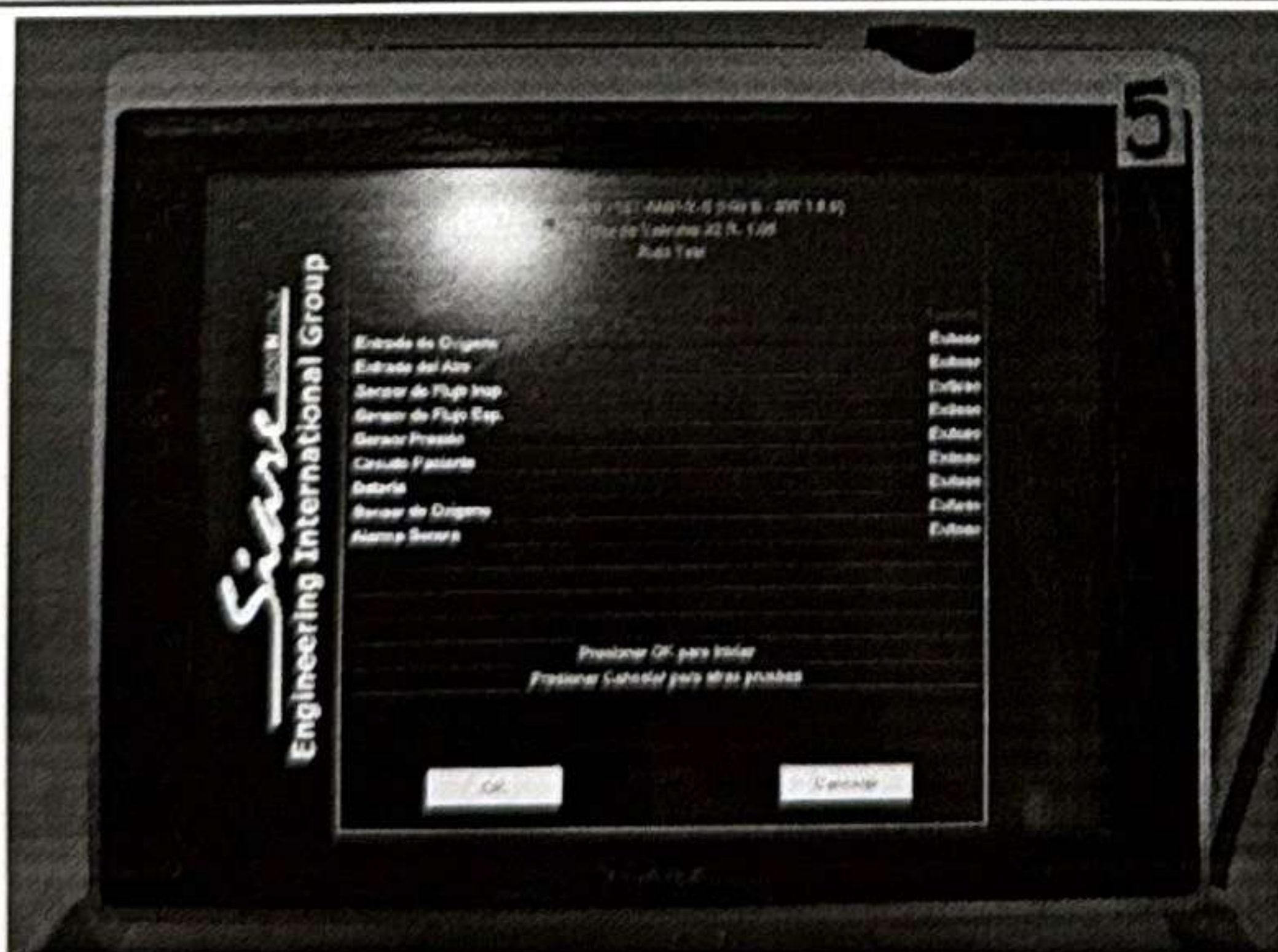

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



ING. ISRAEL HERNANDEZ LOMAX

SUB. JEFE DE CONSERVACIÓN

MAT.98205723

Dr. Dionisio Israel Morales Marentes

Coordinador de Unidad de
Cuidados Intensivos

Ced. Prof. 13350253

Matrícula 97205126

9.5 Tabla procedimiento de prueba

Número de Serie: **65634**

Ref.	Verificación	Valores medidos	Resultado	Notas
1	Aspecto estético		☒ Pos. ☐ Neg.	
2	Presencia marcas		☒ Pos. ☐ Neg.	
3	Versión software	Rel. <u>1.8.6</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
4	AUTO-PRUEBA		☒ Pos. ☐ Neg.	
	Alarma acústica		☒ Pos. ☐ Neg.	
5	Pérdida circuito paciente (PRUEBA)	Pérdida <u>5ml/mm</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
6	Calibración sensor O2 (PRUEBA)	<u>52</u> mV	☒ Pos. ☐ Neg.	
7	Verificación sensor O2 (99%)	<u>100</u> %	☒ Pos. ☐ Neg.	
8	Presión 10 cmH2O configurada	Med. <u>10</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
	20 cmH2O	Med. <u>20</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
9	Calibración sensor de flujo		☒ Pos. ☐ Neg.	
10	Modo operativo VCV/VAC		☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación DISPARADOR flujo		☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación DISPARADOR presión		☒ Pos. ☐ Neg.	
11	Verificación frecuencias	Config. 12 bpm Mis. <u>12</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
		Config. 40 bpm Mis. <u>40</u>		
		Config. 70 bpm Mis. <u>70</u>		
	Alarma baja/alta frecuencia		☒ Pos. ☐ Neg.	
12	Pérdida circuito baja presión	Config. 21%	☒ Pos. ☐ Neg.	
		Config. 100 %	☒ Pos. ☐ Neg.	
13	Alarma alimentación eléctrica		☒ Pos. ☐ Neg.	
14	Alarma alimentaciones gas		☒ Pos. ☐ Neg.	
15	Función INSP HOLD		☒ Pos. ☐ Neg.	
16	Función EXP HOLD		☒ Pos. ☐ Neg.	
17	Nebulizador (6l/min)	Mis. <u>6 l/min</u>	☒ Pos. ☐ Neg.	
18	Función 100% O2		☒ Pos. ☐ Neg.	



ING. ISRAEL HERNÁNDEZ LOMA
SUB. JEFE DE CONSERVACIÓN
MAT.98205723

Manual de Servicio, DU5065300 / rev. - 02/09/2013

Dr. Dionisio Israel Morales Marentes
Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos
Ced. Prof. 13350253
Matrícula 97205126

Número de Serie:

19	FiO2	Configurada 21	AdF	Siaretron	☒ Pos. ☐ Neg.
		Configurada 30			
	%	Configurada 60			
		Configurada 80			
		Configurada 99			
	Alarma baja/alta FiO2				☒ Pos. ☐ Neg.
20	Modo operativo VC/VAC				
	Vti (Ti = 0)	AdF 21%	AdF 100%	Siaretron	☒ Pos. ☐ Neg.
	Config 50 ml (30)	NA	NA	NA	
	Config. 100 ml (20)	100	100	100 ml	
	Config. 250 ml (20)	250	250	250 ml	
	Config. 500 ml (15)	500	500	500 ml	
	Config. 750 ml (15)	750	750	750 ml	
	Config. 1000 ml (12)	1000	1000	1000 ml	
Alarma bajo/alto Vte				☒ Pos. ☐ Neg.	
Alarma bajo/alto VMi				☒ Pos. ☐ Neg.	
21	Alarma baja/alta presión		Retardo <u>1</u> seg.		☒ Pos. ☐ Neg.
22	Comprobación relación I:E				☒ Pos. ☐ Neg.
23	Función SIGH				☒ Pos. ☐ Neg.
24	PEEP	0	AdF	Siaretron	☒ Pos. ☐ Neg.
	cmH2O	5			
		10			
		15			
		20			
	Alarma baja/alta PEEP				☒ Pos. ☐ Neg.

Número de Serie:

	VC/VAC BABY	AdF	Siaretron	☒ Pos. ☐ Neg.	
25	Config. 5 ml (50bpm) +/-1 Config. 10 ml (50bpm) +/-1 Config. 20 ml (50bpm) +/-2	<u>5</u> <u>10</u> <u>20</u>	5 ml 10 ml 20 ml		
26	Modo operativo APCV			☒ Pos. ☐ Neg.	
27	Modo operativo APCV-TV			☒ Pos. ☐ Neg.	
28	Modo operativo PSV			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Apnea Back Up			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación parámetros de BK			☒ Pos. ☐ Neg.	
29	Modo operativo PSV-TV			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Apnea Back Up			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Verificación parámetros de BK			☒ Pos. ☐ Neg.	
30	Función MAN			☒ Pos. ☐ Neg.	
31	Modo operativo V-SIMV			☒ Pos. ☐ Neg.	
32	Modo operativo P-SIMV			☒ Pos. ☐ Neg.	
33	Modo operativo CPAP			☒ Pos. ☐ Neg.	
34	Modo operativo APRV			☒ Pos. ☐ Neg.	
35	Configuración parámetros por defecto			☒ Pos. ☐ Neg.	
36	Sensor gas			☒ Pos. ☐ Neg.	
	Alarma EtCO2		NO APLICA	☐ Pos. ☐ Neg.	
37	Parámetros respiradores medidos			☒ Pos. ☐ Neg.	
38	Parámetros respiradores adicionales			☒ Pos. ☐ Neg.	
39	GRÁFICOS - BUCLES			☒ Pos. ☐ Neg.	
40	TENDENCIAS - EVENTOS			☒ Pos. ☐ Neg.	
41	IDIOMA configurado	ESPAÑOL		☒ Pos. ☐ Neg.	
42	Hoja prueba test eléctrico		NO APLICA	☐ Pos. ☐ Neg.	
43	Horas de funcionamiento				