



Orden de Servicio

320501-142902
I.C.U. No. 1

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSION: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 08/07/2024	Fecha fin 08/07/2024	Folio N° 289
Hora inicio 18:40	Hora fin 19:40	No. de reporte

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre HG2 1 Oaxaca Hospital General Regional de Oaxaca		Marca DYDETEC	
Dirección Ote. 6 2115, Centro, 94364, Oaxaca, Ver.		Modelo GARDI	
Solicitante	Teléfono	No. de serie GTV12020-0361	

Datos del servicio			
Ubicación en hospital Inhaloterapia		☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo
Responsable (es)		☐ Instalación	☐ Capacitación
		☐ Actualización	☐ Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo	☒ Fluke VT900	Verificación de desempeño	☒
Fecha de próxima calibración	☐ IMTPA300	Calibración de celda	☒
	☐ Otro:	Prueba de fugas	☒
		Extracción de logs	☒
		Bloqueo seguridad y botones	☒
		Otro:	☐

Diagnóstico:		Descripción del servicio realizado	
JEFATURA DE CONSERVACION UNIDAD No 1 HOSPITAL GENERAL REGIONAL OAXACA, VER.		Se realiza limpieza y desinfección del equipo, pruebas de desempeño, fugas. Se realiza limpieza, desinfección, cambio de O-rings y lubricación de los mismos. Se vuelven a realizar las pruebas de desempeño y fugas y extracción de logs. No se requiere asistencia de capacitación técnica.	
		El equipo queda apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado 100% funcional. Equipo funcionando correctamente ☒	
		Refacciones y consumibles	
		Cantidad	Cantidad
		☐ MP-0002 Batería 12 v 17 ah	☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5
		☐ VG-0040 Ensamble membrana	☐ MP-0110 Escuadra 40-40
		☐ VG-0050 Membrana de vacío	☐ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris
		☐ MP-0059 Celda de oxígeno	☐ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16
		☐ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	☐ MP-0113 Tuerca con collar M6
		☐ VG-0056 Empaque reservorio	☐ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16
		☐ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	☐ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6
		☐ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam ext.m	☐ MP-0007 Gancho porta circuito
Otros:			
810K-0146_1 IMSS Mantenimiento 2024-B			



Noé Luis García López
Inhaloterapeuta
Mat. 99329373

Realizó

Oscar Nicolás Aranda Pérez



Autorizó
HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 1
OAXACA, VER.
Ing. Jordi Y. Alvarado Romero
SUB JEFE DE CONSERVACION N° 1
Mat. 98323174



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio 08/07/2024	Fecha fin 08/07/2024	Folio N° 288
Hora inicio 13:30	Hora fin 15:00	No. de reporte

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre HG2 Hospital General Regional de Orizaba		Marca DYDETEC	
Dirección Cte. 6 2115, Cerro, 94364, Orizaba Ver		Modelo GATO1	
Solicitante	Teléfono	No. de serie GTV12020-0429	

Datos del servicio			
Ubicación en hospital Inhaloterapia		☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo
Responsable (es)		☐ Instalación	☐ Capacitación
		☐ Actualización	☐ Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo ☒ Fluke VT900	☒ Kit de herramientas	Verificación de desempeño ☒	Extracción de logs ☒
Fecha de próxima calibración ☐ IMT PF300	☒ Llaves Allen	Calibración de celda ☒	Bloqueo seguridad y botones ☒
☐ Otro:	☐ Otro:	Prueba de fugas ☒	Otro: ☐

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico:  Se realiza limpieza del equipo, verificación de desempeño, pruebas de fugas y cambio de O-rings en la neumática del equipo junto con lubricación y desinfección. Se vuelven a realizar pruebas de desempeño, fugas y extracción de logs. El equipo quedó apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado 100% funcional. No se requirió de capacitación técnica. ☒ Equipo funcionando correctamente	
Refacciones y consumibles	
☐ MP-0002 Batería 12 v 17 ah ☐ VG-0040 Ensamble membrana ☐ VG-0050 Membrana de vacío ☐ MP-0059 Celda de oxígeno ☐ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg ☐ VG-0056 Empaque reservorio ☐ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm ☐ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam ext.m	☐ MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5 ☐ MP-0110 Escuadra 40-40 ☐ MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris ☐ MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16 ☐ MP-0113 Tuerca con collar M6 ☐ MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16 ☐ MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6 ☐ MP-0007 Gancho porta circuito
Otros: Blok-0146-1 KIT 1433 Mantenimiento 2024-B	

Noé Luis García López
Aprobo
Inhaloterapeuta
IMSS Mat. 99329373

Realizó

Diego Nicolás Aranda Pérez

Autoreizó
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No 1
Ing. Jorge Alvarado Romo
SUB JEFE DE CONSERVACION No. 1
Mat. 99323174



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024



Noé Luis García López
Inhaloterapeuta
Mat. 99329373

Realizad

Owen Nicolás Aranda Pérez



Ing. Héctor A. López Ventura
JEFE DE
CONSERVACIÓN DE UNIDAD
MAT. 1. 1991

Autorizó

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1
Ing. Jordy Alvarado Romero
SUB JEFE DE CONSERVACION No. 1
Tel. 98323174



Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:

VIGENCIA A PARTIR DE:
14-11-2022

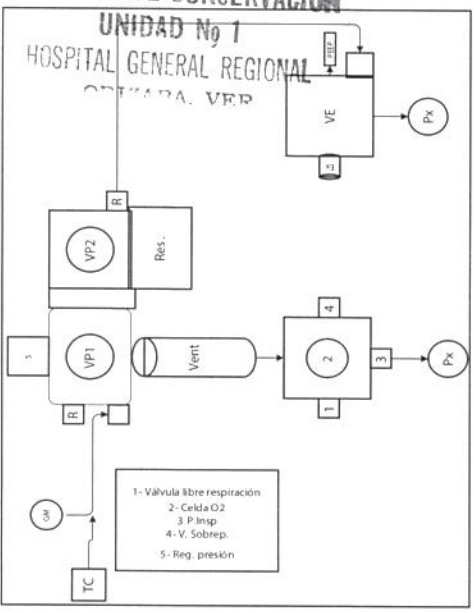
ACTUALIZACIÓN:
14-11-2024

Fecha inicio	08/07/2024	Fecha fin	08/07/2024	Folio	Nº 285
Hora inicio	15:00	Hora fin	16:20	No. de reporte	

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre	HG2 1 Orizaba Hospital General Regional de Orizaba	Marca	DYDETEC
Dirección	Ote. 6 2415, Centro, 94364, Orizaba, Ver.	Modelo	GATSI
Solicitante		No. de serie	GTV12020-0373
	Teléfono		

Datos del servicio	
Ubicación en hospital	Inhaloterapia
Responsable (es)	
☒ Mantenimiento preventivo	☐ Mantenimiento correctivo
☐ Instalación	☐ Capacitación
☐ Actualización	☐ Otro:

Herramienta utilizada		Pruebas realizadas	
Analizador de flujo	☒ Fluke VT900	Verificación de desempeño	☒
Fecha de próxima calibración	☐ IMT PF300	Calibración de celda	☒
	☐ Otro:	Prueba de fugas	☒
		Extracción de logs	☒
		Bloqueo seguridad y botones	☒
		Otro:	☐

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico:	Se realiza limpieza y desinfección del equipo, pruebas de desempeño, fugas. Se realiza limpieza, desinfección, cambio de O-rings y lubricación de los mismos. Se vuelven a realizar las pruebas de desempeño y fugas y extracción de logs. No se requirió capacitación técnica.
	El equipo queda apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% funcional. Equipo funcionando correctamente ☒
Referencias y consumibles	
☐ MP-0002 Bateria 12 v 17 ah	Cantidad
☐ VG-0040 Ensamble membrana	Cantidad
☐ VG-0050 Membrana de vacío	
☐ MP-0059 Celda de oxígeno	
☐ MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	
☐ VG-0056 Empaque reservorio	
☐ MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	
☐ MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam extem	
Otros:	
320501-142902 I.C.U. No. 1	

Noé Luis García López
Inhaloterapeuta
IMSS Mat. 99329373

Realizó

Owen Nicolás Aranda Pérez

Autorizó
Ing. José y Alvarado Romero
SUB JEFE DE CONSERVACION No. 1
Mat. 99323174