



# Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001  
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:  
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:  
14-11-2022

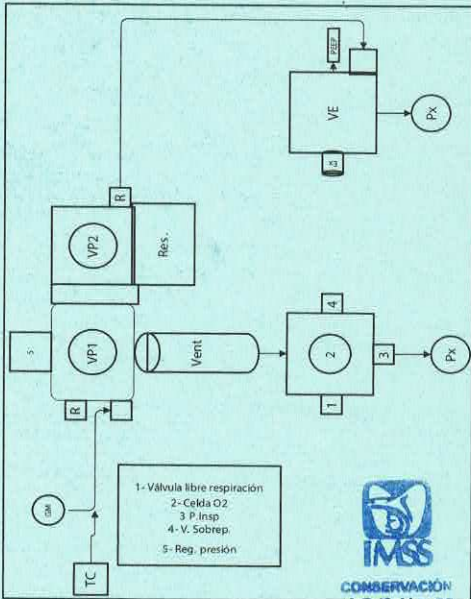
ACTUALIZACIÓN:  
14-11-2024

Fecha inicio 05-06-2024	Fecha fin 05-06-2024	Folio N° 056
Hora inicio 17:00	Hora fin 17:30	No. de reporte

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre IMSS Hospital General de Zona No 20 La Margarita	Marca DYDETEC	Dirección C.55 Ote 432, INFONAVIT la margarita, 72560 Tehuacan Puebla	Modelo GATS1
Solicitante	Teléfono	No. de serie GTV12020-0473	

Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhaloterapia	<input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada	Pruebas realizadas
Analizador de flujo <input type="checkbox"/> Fluke VT900 Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300 <input type="checkbox"/> Otro:	Verificación de desempeño <input type="checkbox"/> Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/> Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kit de herramientas <input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen <input type="checkbox"/> Otro:	Extracción de logs <input type="checkbox"/> Bloqueo seguridad y botones <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico: 	<p>Se realiza inspección del equipo el cual no pasa prueba de fugas.            Se revisa el equipo y se encuentran desconectadas mangueras internas            se colocan las mangueras y se realizan pruebas de fuga y celda de oxígeno con resultados satisfactorios.            El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado 100% Funcional</p> <p>Equipo funcionando correctamente <input checked="" type="checkbox"/></p>
Refacciones y consumibles	
Cantidad <input type="checkbox"/> MP-0002 Batería 12 v 17 ah <input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana <input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacío <input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxígeno <input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg <input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio <input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm <input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m	Cantidad <input type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5 <input type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40-40 <input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris <input type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16 <input type="checkbox"/> MP-0113 Tuerca con collar M6 <input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16 <input type="checkbox"/> MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6 <input type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito
Otros:	

Dra. Rosa Elena Zamudio Jaramillo  
JEFA UNIDAD CUIDADO APROBADO DEL ADULTO



Matricula 99383929  
Ced. Esp. 5907125



Realizó

Carlos Enrique López Cedillo

Autorizó

Ing. Luis Ángel Mota González  
Jefe de Conservación



H.C. No. 20  
Mat. 11671068





# Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001  
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:  
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:  
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:  
14-11-2024

Fecha inicio 05-06-2024	Fecha fin 05-06-2024	Folio Nº 035
Hora inicio 14:30	Hora fin 15:00	No. de reporte

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre IMSS Hospital General de Zona No. 20 La Margarita	Marca DYDETEC	Dirección C. 55 Ote. 432, INFONAVIT La margarita, 72560 Heroica Puebla	Modelo GATS1
Solicitante	Teléfono	No. de serie GTU12020-0477	

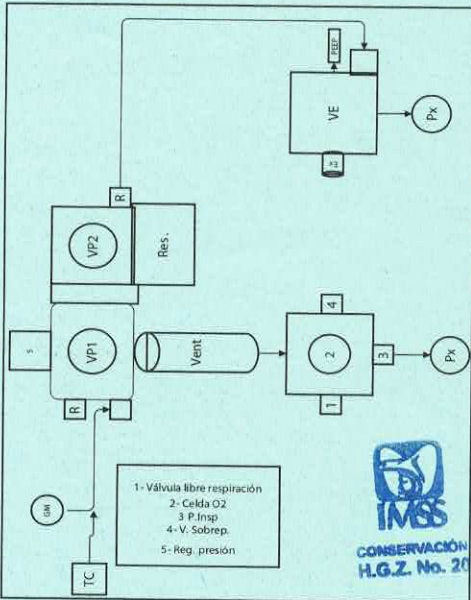
Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhaloterapia	<input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada	Pruebas realizadas
Analizador de flujo <input type="checkbox"/> Fluke VT900 Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300 <input type="checkbox"/> Otro:	Verificación de desempeño <input type="checkbox"/> Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/> Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kit de herramientas <input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen <input type="checkbox"/> Otro:	Extracción de logs <input type="checkbox"/> Bloqueo seguridad y botones <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>

## Descripción del servicio realizado

Diagnóstico:

Se realiza inspección del equipo encontrándolo funcionando correctamente  
 Se detecta sensor de flujo desechable con fuga siendo la causa del reporte de falla  
 Se realizan pruebas de fuga y calibración de celda con resultados satisfactorios  
 El equipo queda operativamente apto para el trabajo para lo que fue diseñado  
 100% Funcional  
 Equipo funcionando correctamente



## Refacciones y consumibles

Cantidad	Cantidad
<input type="checkbox"/> MP-0002 Bateria 12 v 17 ah	<input type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5
<input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana	<input type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40-40
<input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacío	<input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris
<input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxígeno	<input type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16
<input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg	<input type="checkbox"/> MP-0113 Tuerca con collar M6
<input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio	<input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16
<input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm	<input type="checkbox"/> MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6
<input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diám exte.m	<input type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito

Otros:

HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20 "LA MARGARITA"

RECIBIDO  
 JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD

Dra. Rosa Elena Zamudio Jaramillo  
 JEFA UNIDAD CUIDADOS DEL ADULTO  
 Matricula 99383929  
 Ced. Esp. 5907125

Realizó *[Firma]*

Autorizó  
 Ing. Luis Ángel Mota González  
 Jefe de Conservación  
 HGZ No. 20  
 Mat. 11671068





# Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001  
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:  
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:  
14-11-2022

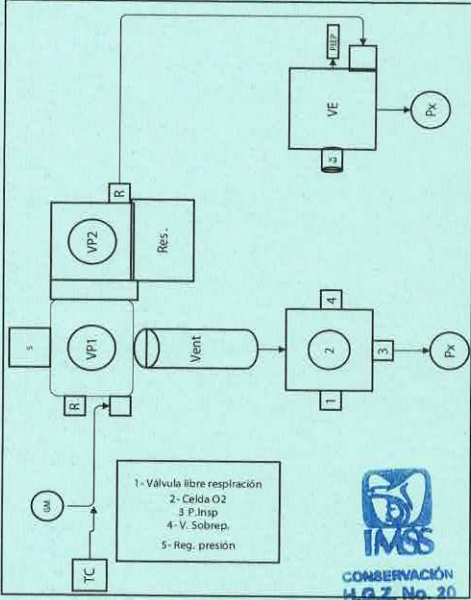
ACTUALIZACIÓN:  
14-11-2024

Fecha inicio <b>05-06-2024</b>	Fecha fin <b>05-06-2024</b>	Folio <b>Nº 036</b>
Hora inicio <b>15:00</b>	Hora fin <b>15:30</b>	No. de reporte

Datos del hospital		Datos del equipo
Nombre <b>IMSS Hospital General de Zona No. 20 La Margarita</b>	Marca <b>DYDETEC</b>	
Dirección <b>C.55 Ote. 432, INFONAVIT La Margarita, 72500 Heroica Puebla de Zaragoza</b>	Modelo <b>GATSI</b>	
Solicitante	Teléfono	No. de serie <b>GTV17020-0264</b>

Datos del servicio	
Ubicación en hospital <b>Inhaloterapia</b>	<input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada	Pruebas realizadas
Analizador de flujo <input type="checkbox"/> Fluke VT900 Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300 <input type="checkbox"/> Otro:	Verificación de desempeño <input type="checkbox"/> Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/> Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kit de herramientas <input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen <input type="checkbox"/> Otro:	Extracción de logs <input type="checkbox"/> Bloqueo seguridad y botones <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado	
<b>Diagnóstico:</b>  	<p>Se realiza inspección del equipo encontrando el equipo funcionando correctamente.</p> <p>Se realiza prueba de fugas y calibración de celda con resultados satisfactorios</p> <p>El equipo queda operativamente apto para el trabajo para lo que fue diseñado</p> <p><b>100% Funcional</b></p> <p>Equipo funcionando correctamente <input checked="" type="checkbox"/></p>
<b>Refacciones y consumibles</b>	
Cantidad <input type="checkbox"/> MP-0002 Bateria 12 v 17 ah <input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana <input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacío <input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxígeno <input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg <input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio <input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm <input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm, Diam exte.m	Cantidad <input checked="" type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox 07.5 <input checked="" type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40-40 <input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris <input type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16 <input type="checkbox"/> MP-0113 Tornillo con collar M6 <input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16 <input type="checkbox"/> MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6 <input type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito
Otros:	

Dra. Rosa Ele...  
JEFA UNIDAD CUIDADO  
Aprobó  
Matriculada  
Ced. Esp. 000...

Realizó

Ing. Luis Ángel Autorizó  
Jefe de Conservación  
HGZ No. 20  
Mat. 11671068







# Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001  
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:  
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:  
14-11-2022

ACTUALIZACIÓN:  
14-11-2024

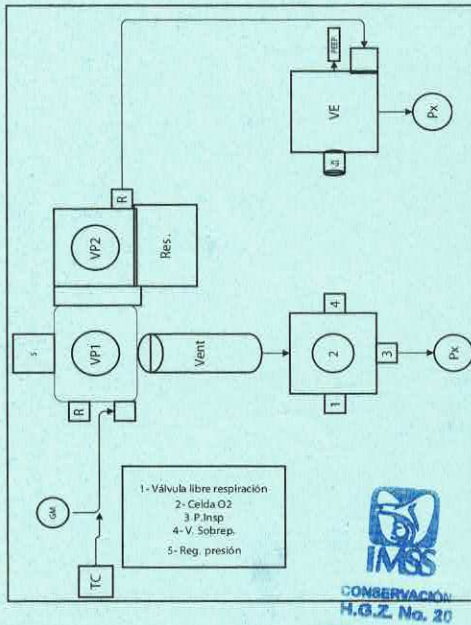
Fecha inicio 05-06-2024	Fecha fin 05-06-2024	Folio N° 054
Hora inicio 15:30	Hora fin 16:30	No. de reporte

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre IMSS Hospital General de Zona No. 20, La Margarita	Marca DYDETEC	Dirección C. 55 Ote. 137, INFONAVIT la margarita, 72560, Heroica Puebla de Zaragoza	Modelo GATSI
Solicitante	Teléfono	No. de serie GTU12020-0470	

Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhabiterapia	<input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:
Responsable (es)	

Herramienta utilizada	Pruebas realizadas
Analizador de flujo <input type="checkbox"/> Fluke VT900 Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300 <input type="checkbox"/> Otro:	Verificación de desempeño <input type="checkbox"/> Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/> Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kit de herramientas <input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen <input type="checkbox"/> Otro:
	Extracción de logs <input type="checkbox"/> Bloqueo seguridad y botones <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado	
Diagnóstico:	<p>Se realiza inspección del equipo encontrándolo funcionando correctamente</p> <p>Se realizan pruebas de fugas y calibración de celda con resultados satisfactorios</p> <p>El equipo queda operativamente apto para el trabajo para lo que fue diseñado</p> <p>100% Funcional.</p> <p>Equipo funcionando correctamente <input checked="" type="checkbox"/></p>



Refacciones y consumibles	
Cantidad	Cantidad
<input type="checkbox"/> MP-0002 Bateria 12 v 17 ah <input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana <input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacio <input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxigeno <input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg <input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio <input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm <input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam ext.m	<input type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5 <input type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40-40 No. 20 <input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris <input type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16 <input type="checkbox"/> MP-0113 Tuerca con collar M6 <input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16 <input type="checkbox"/> MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6 <input type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito
Otros:	

220101142902  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No.20  
"LA MARGARITA"

DELEGACIÓN ESTADAL EN PUEBLA  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA  
No. 20  
05 JUN 2024  
RECIBIDO  
ESTADAL DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD

Dra. Rosa Eleazar Zamudio Jaramilla  
JEFA UNIDAD CUIDADOS DE ENFERMERIA Aprobó

Matricula 99383929  
Ced. Esp. 5907125

Realizó *[Signature]*

Ing. Luis Ángel Mota González  
Autorizó  
Jefe de Conservación  
H.G.Z. No. 20  
MEX. 11671068

*[Signature]*





# Orden de Servicio

CÓDIGO: ANE-09-06-001  
VERSIÓN: 000

FECHA DE ELABORACIÓN:  
24-10-2022

VIGENCIA A PARTIR DE:  
14-11-2022

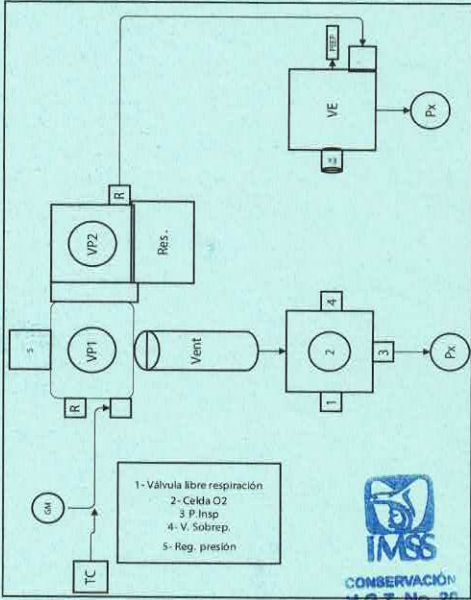
ACTUALIZACIÓN:  
14-11-2024

Fecha inicio 05-06-2024	Fecha fin 05-06-2024	Folio Nº 055
Hora inicio 16:00	Hora fin 16:30	No. de reporte

Datos del hospital		Datos del equipo	
Nombre IMSS Hospital General de Zona No. 20 La Margarita	Marca DYDETEC	Dirección C. 55 calle 432, INDOAVIT La Margarita, 72560 Henrievista	Modelo GATSI
Solicitante	Teléfono	No. de serie GTU17070-0405	

Datos del servicio	
Ubicación en hospital Inhaloterapia	<input type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Actualización
Responsable (es)	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Otro:

Herramienta utilizada	Pruebas realizadas
Analizador de flujo <input type="checkbox"/> Fluke VT900 Fecha de próxima calibración <input type="checkbox"/> IMT PF300 <input type="checkbox"/> Otro:	Verificación de desempeño <input type="checkbox"/> Calibración de celda <input checked="" type="checkbox"/> Prueba de fugas <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kit de herramientas <input checked="" type="checkbox"/> Llaves Allen <input type="checkbox"/> Otro:	Extracción de logs <input type="checkbox"/> Bloqueo seguridad y botones <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>

Descripción del servicio realizado	
<b>Diagnóstico:</b> 	<p>Se realiza inspección del equipo encontrándolo funcionando correctamente</p> <p>Se pierde imagen en la pantalla del ventilador</p> <p>Se cambia cable de alimentación de pantalla</p> <p>Se realizan pruebas de fuga y calibración de celda con resultados satisfactorios</p> <p>El equipo queda operativamente apto para el trabajo para lo que fue diseñado 100% Funcional</p> <p>Equipo funcionando correctamente <input checked="" type="checkbox"/></p>
Refacciones y consumibles	
Cantidad <input type="checkbox"/> MP-0002 Bateria 12 v 17 ah <input type="checkbox"/> VG-0040 Ensamble membrana <input type="checkbox"/> VG-0050 Membrana de vacío <input type="checkbox"/> MP-0059 Celda de oxígeno <input type="checkbox"/> MP-0055 O-ring silicon 3/4 X 7/8 X 1/16 Pulg <input type="checkbox"/> VG-0056 Empaque reservorio <input type="checkbox"/> MP-0085 Tubo de silicon 2mm x 4mm <input type="checkbox"/> MP-0086 Tubo de silicon 3mm. Diam exte.m Otros: VG-0077 "LAMARGARITA" Pantalla 1 pza	Cantidad <input checked="" type="checkbox"/> MP-0109 Malla de acero inox. Ø7.5 <input type="checkbox"/> MP-0110 Escuadra 40-40 <input type="checkbox"/> MP-0111 Tapa escuadra 40x40 gris <input type="checkbox"/> MP-0112 Tornillo cabeza de martillo M6x16 <input type="checkbox"/> MP-0113 Tuerca con collar M6 <input type="checkbox"/> MP-0114 Tornillo inox. Cil. M6x16 <input type="checkbox"/> MP-0028 Arandela helicoidal de presión M6 <input type="checkbox"/> MP-0007 Gancho porta circuito

Dra. Rosa Elena Zamudio Jaramillo  
JEFA UNIDAD CUIDADOS DE ENFERMOS DEL ADULTO  
Matricula 99383929  
Ced. Esp. 5907125

Realizó *[Signature]*  
*Carla Enrique León Ledillo*

Autorizó *[Signature]*  
Ing. Luis Ángel Delgado González  
Jefe de Conservación  
M.O.E. No. 20  
Mat. 11671068